

SYSTÈME DE SURVEILLANCE PH-IMPÉDANCE

alpHaFLEX

Système de surveillance pH-impédance

Surveillance pH et impédance complète pour un diagnostic clair du RGO. Des soins de qualité et abordables avec le système alpHaFLEX complet.

Enregistreur · Cathéter · Station de calibration · Logiciel alpHaLAB



Qu'est-ce que l'alpHaFLEX ?

alpHaFLEX est un système médical pour le diagnostic du RGO (reflux gastro-œsophagien). Le système permet une mesure simultanée du pH et de l'impédance pour un diagnostic et un traitement précis et personnalisés.

Enregistreur

Upgraded — Faster & Better

50 Hz · conception ergonomique · 6 modes standard · calibrage amélioré · boîtier portable compact.

Cathéter

Wide Range — Designed with Precision

2 ans de conservation · électrodes haute précision · extrémité rigide · diamètre minimal · configuration adaptable.

Logiciel alpHaLAB


Lyon Consensus 2.0

PSPW & MNBI intégrés · auto-analyse · SI/SSI/SAP · score DeMeester · rapports exportables.

Spécifications techniques

Dimensions (L×l×H)	115,5 mm × 66 mm × 26 mm
Poids	≤ 200 g
Tension	1,5 V (pile AA)
Courant	10 mA
Autonomie	≥ 48 heures
Température de fonctionnement	5 °C – 40 °C · < 85% HR

Productoverzicht

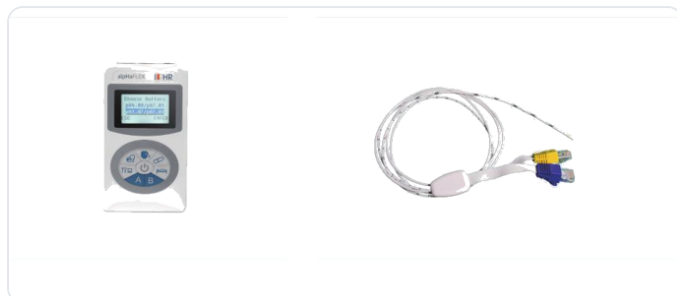

Accessoires inclus

- Tubes de soufflage & station de calibrage
- Solution de calibrage pH et tube
- Pile AA et câble USB

Plateforme logicielle alHaLAB — le Lyon Consensus le plus récent (PSPW & MNBI) intégré

Plateforme & connectivité

Compatible avec cathéter de reflux et produits capsule
Plusieurs dossiers sous un même nom
Processus de calibrage rationalisé
Couplage automatique & téléchargement en un clic

Traitement & rapports

Auto-analyse puissante — moins de temps de traitement
SI, SSI et SAP · score DeMeester automatique
Rapports d'export personnalisables
Tableau d'analyse des données pH inclus

Applications cliniques

01

Traitement personnalisé

Une exposition acide accrue indique un reflux actif. Les soignants peuvent instaurer des IPP ou adapter la posologie sur base de données pH objectives.

02

Suivi de la réponse au traitement

Des mesures pH périodiques montrent si le traitement anti-reflux est efficace. Une baisse du temps d'exposition acide est un signe positif.

03

Distinction reflux acide / non acide

La mesure d'impédance détecte les épisodes de reflux acides et non acides, essentiel chez les patients avec symptômes persistants malgré un traitement IPP.

04

Prévention du surtraitement

Des valeurs pH normales en présence de plaintes excluent un reflux pathologique, évitant médication et effets secondaires inutiles.

Plus d'informations ?

Contactez ECCE Medical pour des démonstrations de produits, des demandes de prix ou une assistance technique.

E-MAIL

steve.stevens@eccemedical.com
nico.heylen@eccemedical.com

TÉLÉPHONE

+32 473 84 45 79
+32 497 59 45 91

WEBSITE

www.eccemedical.com